


ディップインガー天然ゴム とっていませんか？

小ロット
製造にも
対応！



IR(合成ゴム)も シリコンも できます！

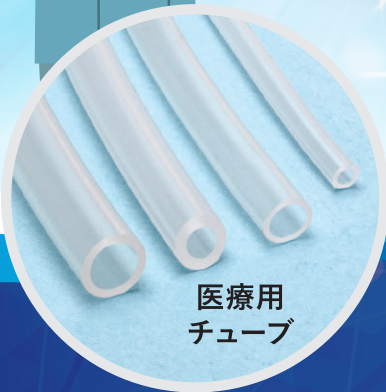

医療用
チューブ



医療用
バルーン



医療用
バルーン

ディッピング成形とは



●原料浸漬

金型を原料に浸漬します。
膜厚調整は浸漬の段階で行います。



●ビード作成

浸漬が終わると、乾燥・型加硫によって成形します。



●乾燥

金型から剥離した製品を本加硫する事によって、完成させます。

ディッピング成形 のメリット

- 金型が雄型だけで済むことが大きな特徴であり、ネックとなる金型費用を抑制でき初期投資コストを抑えられます。
- 他の成形方法では難しい、薄膜製品の成形に適しております。
- ロットの少ない製造にも対応しやすく、オーダーメイド製造に向いております。

OEM製造について

オーダーメイドにて医療機器用チューブやバルーンのOEM製造を承っております。
お客様のご要望を受け止め、様々なご提案を致します。
まずはお気軽にお問い合わせください。

1

お問い合わせ、ご相談

OEM製造に関するお問い合わせ、ご意見を承っております。
お気軽に下記までお問い合わせください。

不二ラテックス株式会社 メディカル営業部

TEL 03-3259-2528

※受付時間：平日9:00～17:40（土・日・祝日・年末年始はお休み）

URL <https://www.fujilatex.co.jp/medical/>




〔お問合せフォームへ〕

2

お打ち合わせ

お問い合わせ頂いた内容を基に、ご面談の上、製品のスペック、条件などを決めていきます。

必要に応じて、秘密保持契約にも対応しております。

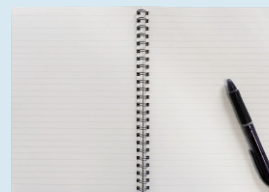

3

お見積もり

スペック、条件などが決まりましたら、お見積りを提示させていただきます。
併せておおよその納期やその他連絡事項についてもお知らせ致します。



4

製造

ご要望に合わせた製品を製造いたします。

納品までのリードタイムは製造開始後、2ヶ月が目安となります。

（条件により製造期間は前後致します。）

5

納品 ご希望の指定場所に納品いたします。

【ご注意】

- ① オーダーメイド品の最小製造ロットは、製品や条件により変化します。
 - ② オーダーメイド製造に必要なリードタイムは、2ヶ月程度が目安となります。
 - ③ 梱包形態は当社NB製品と同様になります。
- ※その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。



製造工場：栃木千塚工場

栃木千塚工場は2018年11月に開設した、最新鋭の工場となります。
おもに医療用メディカル製品を中心に製造し、豊かな暮らしに貢献できる製品開発を目指しています。

所在地

〒328-0135

栃木県栃木市千塚町1705

栃木千塚産業団地内

不二ラテックス株式会社
メディカル営業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1
TEL／03-3259-2528 FAX／03-3293-2426
URL／<https://www.fujilatex.co.jp/medical/>